


フリースロープ

FREE-SLOPE

持運びタイプ(2枚折り畳み式)

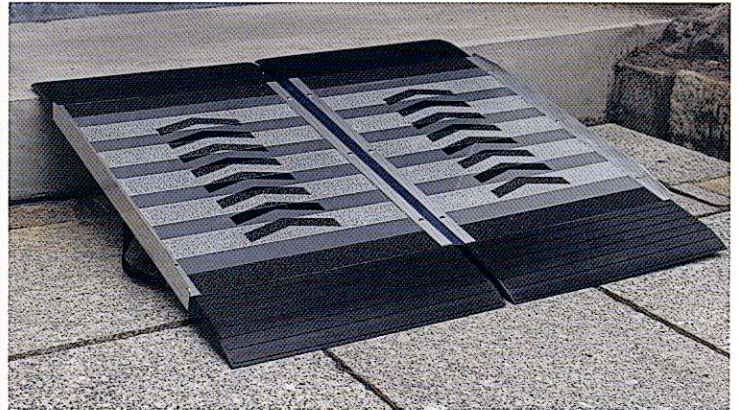

先端滑り止めゴム(上部)
先端の突起部分がスレを防止

脱輪防止材
高さ20mmのアルミ製

先端滑り止めゴム(下部)
耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性に優れた合成ゴム(EPDM)を使用

折り畳み固定ベルト
マジックテープ製で簡単に開閉出来ます

表面滑り止め
ポリエステルフィルム製の透明ノンスリップシートを使用



連結材
カーウ材を使用(PP繊維シート)

- 製品重量5.2Kgと軽量で、背負って移動出来るため、両手が塞がらず安心して車椅子の補助をすることができます。
- 先端(上下部)がゴム製のため、設置場所に傷をつける事が無くどこでも安心して使用できます。
- 表面の矢印が車椅子の誘導ラインとなっており安心です。

ベルト取付方法

-肩掛け・手持ちタイプ-

-背負いタイプ-

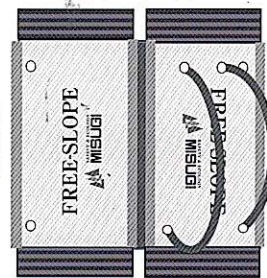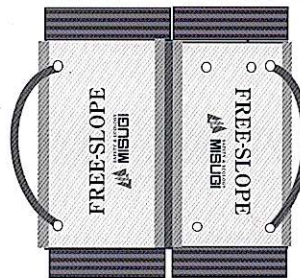

ボルト



スペーサー

ベルト

ボルト穴

【ベルト固定方法】

右図のようにボルト固定して下さい。

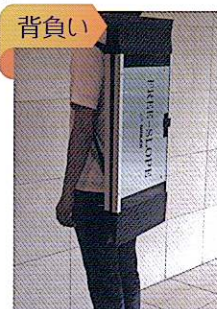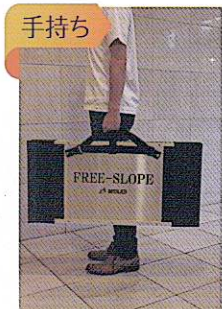

コード	設置時サイズ(幅×長さ)	折り畳み時サイズ(幅×長さ×厚み)	重さ	耐荷重	適合段差	価格(円)
FS-200	約865×870mm	約430×870×70mm	5.2Kg	300Kg	50~200mm	98,000

付属品：ベルト×2本 ボルト×4本 スペーサー×4個